


marClamp® CUT IQ



marClamp® CUT IQ

Une efficacité et une rentabilité inégalées

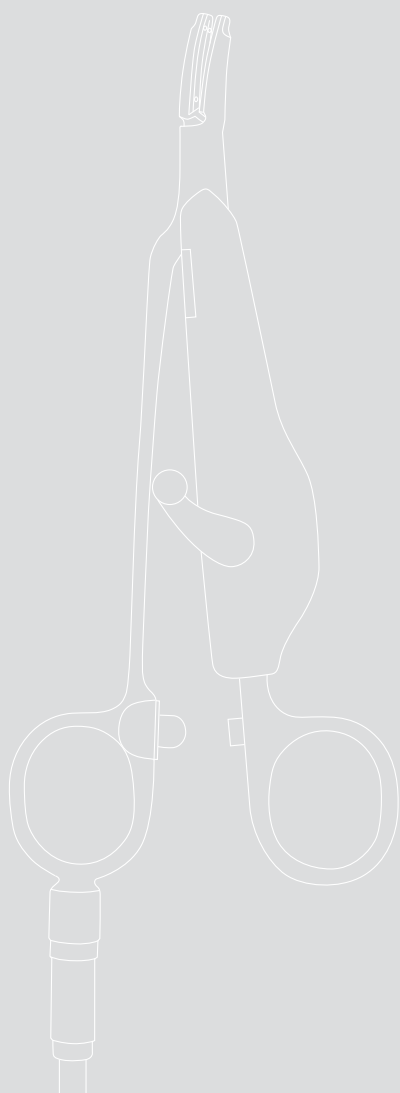

NOUVEAU

marClamp® CUT IQ

Le nouvel instrument combiné de scellement de vaisseaux sanguins pour la chirurgie ouverte

maxium®

+ *marClamp*® CUT IQ

= SealSafe® IQ

... pour un système de scellement encore plus intelligent !



Tous les avantages d'un coup d'œil

Les instruments *marClamp*® CUT IQ associés à l'appareil de chirurgie HF maxium® servent au scellement bipolaire de vaisseaux sanguins avec section de tissus consécutive, **sans aucun changement d'instrument!**

Simplicité convaincante grâce à la fonction « Plug and Play »

Le générateur HF maxium® identifie l'instrument raccordé grâce à la technologie IQ innovante et règle aussitôt les paramètres requis.

L'interrupteur intégré aux instruments déclenche automatiquement l'émission du courant de scellement spécifique SealSafe® IQ après la préhension du tissu, aucun interrupteur à pédale complémentaire n'est nécessaire.

Une fois le scellement achevé, le courant est interrompu et un signal acoustique est émis.

Une rentabilité inégalée

L'instrument *marClamp*® CUT IQ se caractérise par ses coûts par application très réduits qui résultent de sa totale capacité de réutilisation et de la proportion réduite d'éléments à usage unique de la lame stérile.

- Préparation, scellement et section fiables avec un seul instrument
- Processus de scellement reproductible et rapide
- Durées d'opération plus courtes
- Expansion thermique latérale minimale
- Importantes économies de coûts grâce à la possibilité de réutilisation et la proportion réduite d'éléments à usage unique
- Résultats de coupe optimaux grâce à une lame à usage unique stérile
- Activation manuelle
- Fonction « Plug and Play »
- Facilité de manipulation et de préparation
- Autoclavable à 134 °C
- Longueur de scellement: 17 mm
- Longueur de coupe: 15 mm




*« La réutilisation est rentable.
Chez nous, ce sont la sécurité, la fiabilité
et la rentabilité qui comptent! »*

Prof. Dr méd. Gerald Gitsch,
Directeur médical de la Clinique gynécologique
universitaire de Fribourg (Allemagne)



Comparatif des coûts

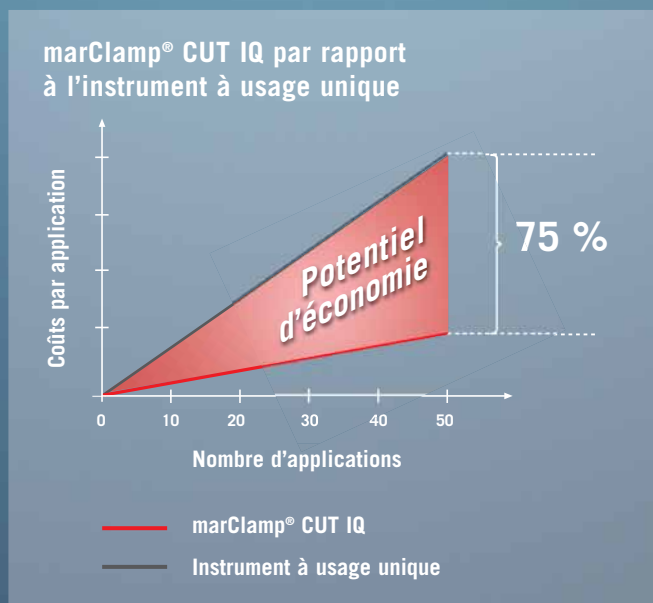

Domaines d'application

Gynécologie

- Lymphadénectomie
- Adhésiolyse
- Cystectomie

Chirurgie viscérale

- Colectomie
- Gastrectomie
- Splénectomie
- Adrénalectomie
- Néphrectomie

ORL

- Thyroïdectomie
- Curage cervical
- Laryngectomie

Urologie

- Cystectomie
- Hydrocèle
- Résection partielle de la vessie

Vue d'ensemble des articles

Référence	Désignation
80-632-00-04	Lame pour instrument marClamp® CUT IQ, stérile, UC=10
80-632-18-04	marClamp® CUT IQ cpl., 18 cm
80-630-58-04	Outil de nettoyage
80-632-01-04	Jeu de brosses de nettoyage, 3 unités

KLS Martin Group

Karl Leibinger Medizintechnik GmbH & Co. KG
78570 Mühlheim · Germany
Tel. +49 7463 838-0
info@klsmartin.com

KLS Martin GmbH + Co. KG
79224 Umkirch · Germany
Tel. +49 7665 9802-0
info@klsmartin.com

Stuckenbrock Medizintechnik GmbH
78532 Tuttlingen · Germany
Tel. +49 7461 165880
verwaltung@stuckenbrock.de

Rudolf Buck GmbH
78570 Mühlheim · Germany
Tel. +49 7463 99516-30
info@klsmartin.com

KLS Martin France SARL
68200 Mulhouse · France
Tel. +33 3 8951 3150
france@klsmartin.com

Martin Italia S.r.l.
20864 Agrate Brianza (MB) · Italy
Tel. +39 039 605 6731
italia@klsmartin.com

Martin Nederland/Marned B.V.
1271 AG Huizen · The Netherlands
Tel. +31 35 523 4538
nederland@klsmartin.com

KLS Martin UK Ltd.
Reading RG1 3EU · United Kingdom
Tel. +44 1189 000 570
uk@klsmartin.com

Nippon Martin K.K.
Osaka 541-0046 · Japan
Tel. +81 6 62 28 9075
nippon@klsmartin.com

KLS Martin L.P.
Jacksonville, FL 32246 · USA
Tel. +1 904 641 7746
usa@klsmartin.com

KLS Martin do Brasil Ltda.
CEP 04.531-011 São Paulo · Brazil
Tel.: +55 11 3554 2299
brazil@klsmartin.com

KLS Martin Australia Pty Limited
Artarmon NSW 2064 · Australia
Tel.: +61 2 9439 5316
australia@klsmartin.com

KLS Martin Malaysia Sdn. Bhd.
10200 Penang · Malaysia
Tel. +604 263 2566
malaysia@klsmartin.com

Gebrüder Martin GmbH & Co. KG
Representative Office
121471 Moscow · Russia
Tel. +7 499 792-76-19
russia@klsmartin.com

Gebrüder Martin GmbH & Co. KG
Representative Office
201203 Shanghai · China
Tel. +86 21 5820 6251
china@klsmartin.com

Gebrüder Martin GmbH & Co. KG
Representative Office
Dubai · United Arab Emirates
Tel. +971 4 454 16 55
middleeast@klsmartin.com

Gebrüder Martin GmbH & Co. KG

Une société de KLS Martin Group

KLS Martin Platz 1 · 78532 Tuttlingen · Germany
Postfach 60 · 78501 Tuttlingen · Germany
Tel. +49 7461 706-0 · Fax +49 7461 706-193
info@klsmartin.com · www.klsmartin.com

